


# Brugsvejledning Trulicity® 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen dulaglutid

06-2017  
P577028B-3

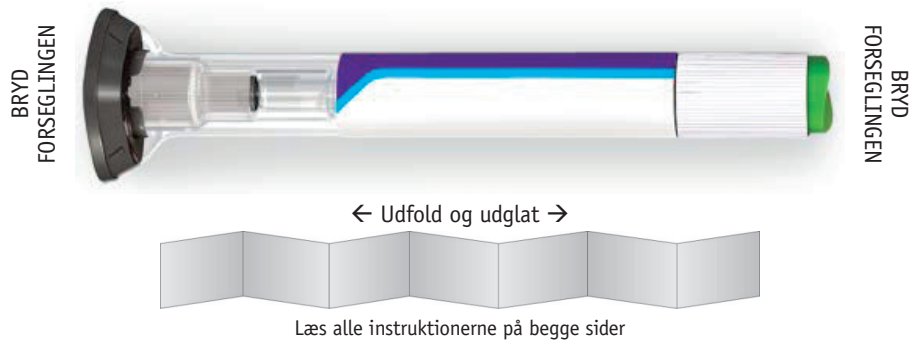

## OM TRULICITY FYLDT PEN

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din fyldte pen. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvordan du indsprøjter Trulicity korrekt.


- Pennen er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar til brug. Hver pen indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (1,5 mg). Hver pen leverer kun én dosis.
- **Trulicity tages en gang om ugen.** Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.
- Når du trykker på den grønne injektionsknap, vil pennen automatisk stikke nålen **ind i din hud**, sprøjte medicinen ind og trække nålen tilbage, **når injektionen er færdig**.

## INDEN DU STARTER


Tag ud	Tjek	Undersøg	Gør dig klar
af køleskabet.	etiketten for at sikre, at det er den korrekte medicin, og at den ikke er udløbet.	pennen. Brug ikke pennen, hvis du bemærker, at den er beskadiget, eller at medicinen er uklær, misfarvet eller indeholder partikler.	ved at vaske hænder.

## VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

- Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken kan hjælpe dig med at vælge det bedste injektionssted for dig.
- Du kan indsprøjte medicinen i maven (abdomen) eller låret.
- En anden person kan eventuelt give dig injektionen i overarmen.
- Skift injektionssted hver uge. Du kan bruge samme kropsdel, men sørg for at vælge et nyt injektionssted på den kropsdel.

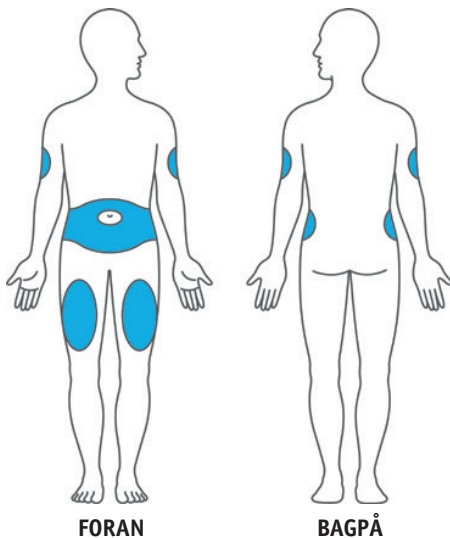

1. TRÆK DEN GRÅ FOD AF
2. PLACER OG LÅS OP
3. TRYK OG HOLD

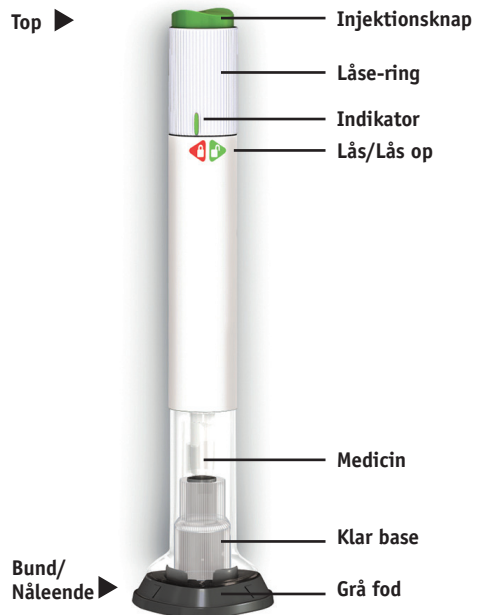


## 1 TRÆK DEN GRÅ FOD AF

🔒 Sørg for at pennen er **låst**.


- Træk den grå fod af og kassér den.


**Du må ikke sætte den grå fod på igen - det kan beskadige nålen. Rør ikke ved nålen.**

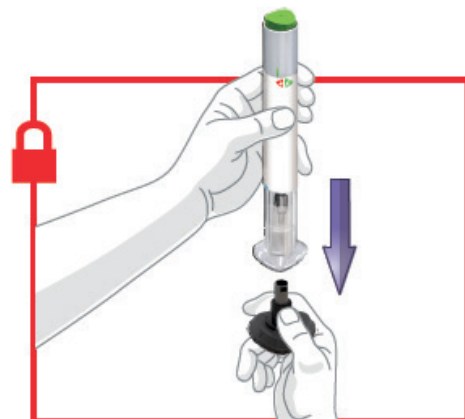

## 2 PLACER OG LÅS OP


- Placer den klare base fladt og fast mod din hud på injektionsstedet.

 Lås op ved at dreje låseringen.

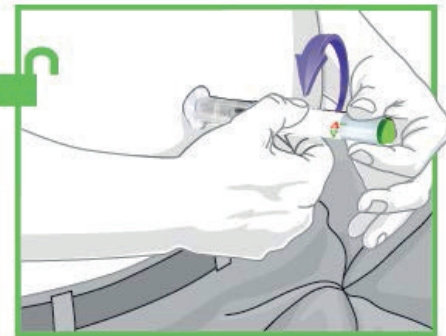

## 3 TRYK OG HOLD

- Tryk på den grønne injektionsknap og hold den nede; du vil høre et højt klik.

 Fortsæt med at holde den klare base godt fast mod huden, indtil du hører et klik mere. Det vil lyde i løbet af cirka 5-10 sekunder, når nålen begynder at trække sig tilbage.

- Fjern pennen fra din hud.



- Du ved, at injektionen er færdig, når den grå del er synlig.

## VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering  
Bortskaffelse af pen  
Hyppigt stillede spørgsmål  
Yderligere oplysninger  
Lær mere

## OPBEVARING OG HÅNDTERING

- Pennen indeholder dele af glas. Håndtér den med forsigtighed. Hvis du taber den på en hård overflade, må du ikke bruge den. Brug en ny pen til din injektion.
- Opbevar din pen i køleskabet.
- Når du ikke har mulighed for at opbevare pennen i køleskabet, kan du opbevare den ved stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.
- Pennen må ikke nedfryses. Hvis pennen har været nedfrosset, MÅ DEN IKKE BRUGES.
- Opbevar pennen i den originale pakning for at beskytte mod lys.
- Opbevar pennen utilgængeligt for børn.
- Læs alle oplysningerne om korrekt opbevaring i indlægseddelen.

## BORTSKAFFELSE AF PEN

- Pennen bortskaffes i en kanylebeholder eller i henhold til lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger.
- Genbrug ikke den fyldte kanylebeholder.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.



## HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

### Hvad nu hvis der er luftbobler i min pen?

Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

### Hvad nu hvis jeg har låst pennen op og trykket på den grønne injektionsknap, før jeg har trukket den grå fod af?

Tag ikke den grå fod af, og brug ikke pennen. Bortskaf pennen i henhold til lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger. Indsprøjt din dosis med en anden pen.

### Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner den grå fod?

Det er ikke usædvanligt, hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din dosis.

### Skal jeg holde injektionsknappen nede, indtil injektionen er afsluttet?

Det er ikke nødvendigt, men det kan gøre det lettere at holde pennen roligt og godt fast mod huden.

### Jeg hørte mere end to klik under injektionen - to høje klik og et lavt klik. Har jeg fået hele min injektion?

Nogle personer kan høre et lavt klik lige inden det andet høje klik. Det skyldes pennens normale funktionsmekanik. Fjern ikke pennen fra huden, før du hører det andet høje klik.

### Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?

Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

### Jeg er ikke sikker på, at min pen virkede korrekt.

Kontrollér den for at se, om du har fået din dosis. Hvis den grå del er synlig, har du fået din dosis korrekt (se trin 3). Kontakt også lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken for yderligere instrukser. I mellemtiden skal du opbevare pennen sikkert for at undgå nålestikskader.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge pennen uden hjælp fra en person, der er øvet i at bruge Trulicity Pen.

## DU KAN LÆRE MERE HER

- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer med din Trulicity pen.



SCAN DENNE KODE FOR AT ÅBNE  
[www.trulicity.eu](http://www.trulicity.eu)

Senest ændret i juni 2017